

Drogy

Víceúčelový rychlý test ke zjištění 6 různých drog

5 min



Citlivost
> 96 %



Drogy – prostředky vyvolávající závislost s vedlejšími účinky

Drogy jsou psychoaktivní látky, které ovlivňují chování a náladu jejich uživatelů. Užívání jedné nebo více drog však s sebou přináší velká rizika. Dlouhodobě nepříznivě ovlivňují tělesné zdraví a v důsledku případné závislosti lze očekávat psychosociální problémy.

Zjistěte, jak na tom jste: rychlý víceúčelový test drog

S víceúčelovým rychlým testem drog lze na základě vzorku moči rychle a bezpečně prokázat užívání **amfetaminů, benzodiazepinů (uklidňující prostředky), kokainu, marihuany (THC), metadonu a opiátů**. Tento test informuje o tom, které drogy byly užity.

Jak spolehlivý je test Veroval[®]?

Rychlý víceúčelový test drog byl vyvinut tak, aby i v domácím použití mohl být proveden s přesností a spolehlivostí moderní diagnostiky. U testu jde o imunochromatografický analytický postup, který je schopen prokázat drogy resp. jejich metabolity v moči.

Citlivost změřená studií hodnocení funkčnosti činí více než 96 %.

Je provedení testu složité?

Není: všechno, co potřebujete, jsou čistě umyté ruce, hodinky, nádobka a rovná plocha stolu. Přesný postup při testování naleznete na zadní straně.

Na co je nutno dbát?

Varování a důležitá upozornění:

- Test je určen k zevnímu použití.
- Žádnou z částí testu nepožívejte.
- Test uchovávejte mimo dosah dětí.
- Test nevystavujte přímému slunečnímu záření ani mrazu. Nezmrazujte. Uchovávejte na suchém místě při teplotě od 4 °C do 30 °C.
- Výsledky testu mohou nepříznivě ovlivnit vlhkost a nesprávná teplota.
- Produkt smí být použit pouze do vytištěného data použitelnosti.
- Pokud by nebyl návod k použití správně a do všech podrobností dodržen, mohly by být výsledky testu nesprávné.
- Pokud je obal poškozený, test nepoužívejte. Nepoužívejte poškozené části testu.
- Ve vzácných případech mohou být výsledky² falešně pozitivní* (například při příjmu určitých potravin / potravinových doplňků).
- Všechny součásti testu jsou určeny k použití pouze v tomto testu. Test po použití znovu nepoužívejte!
- Test musí být po otevření fóliového sáčku chráněn před znečištěním a proveden do jedné hodiny po otevření.
- Správné vyhodnocení testu může ovlivnit špatný zrak, barvoslepost nebo nedostatečné osvětlení.
- Vzorky moči mohou být infekční. Použité testy je proto třeba zlikvidovat do domácího odpadu a poté si důkladně umýt ruce.

Údaje o funkčnosti:

Víceúčelový rychlý test na drogy může souběžně prokázat následující třídy látek. Přitom je vždy kalibrován s uvedenou citlivostí (Cut-off) na jednoho zástupce:

Test	Zkratka	Kalibrátor	Cut-off (ng/ml)	Prokazatelnost v moči od poslední konzumace ¹
Amfetamin	AMP	D-amfetamin	1 000	1 až 3 dny
Benzodiazepin	BZO	Oxazepam	300	Příležitostně užití: až 3 dny Pravidelné užívání: až 6 týdnů
Kokain	COC	Benzoyllecgonin	300	Kokain lze prokázat jen několik hodin, metabolit 2 až 3 dny
Marihuana	THC	11-nor-Δ9-THC-9 COOH	50	Příležitostně užití: 2 až 4 dny Pravidelné užívání: 2 až 6 týdnů
Metadon	MET	Metadon	300	2 až 3 dny
Opiáty	OPI	Morfin	300	Až 8 hodin

Víceúčelový rychlý test drog prokazuje navíc ke kalibrátoru také jiné příbuzné deriváty nebo metabolity.

¹ Mějte na paměti, že jde jen o hrubé směrné hodnoty. Pro prokazatelnost drog v moči hraje roli řada individuálních faktorů.

Důležité upozornění:

Pozitivní a nejasné výsledky je třeba potvrdit další analytickou metodou.

²Falešně pozitivní = pozitivní výsledek testu je signalizován falešně, ačkoli ve skutečnosti je výsledek negativní.

www.veroval.cz

Obsah balení:

- 1 fóliové balení s víceúčelovou testovací kazetou a vysušovacím prostředkem
- 1 návod k použití

Vysvětlení symbolů

 Dodržujte návod k použití	 Uchovávejte v suchu při teplotě od +4 °C do +30 °C.	 Doba použitelnosti (viz vytištěný údaj na obalu)
 Obsah stačí na 1 test		 Nepoužívejte opakovaně
 Výrobce		 Označení šarže (viz vytištěný údaj na obalu)
 Doba reakce víceúčelového testovacího proužku	 Rychlý test k domácímu použití	

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg


Distributor:
CZ – HARTMANN-RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
kontakt@hartmann.cz

bezplatná infolinka: 800 100 333

Drogy

Rychlý víceúčelový test k domácímu použití

Provedení testu:

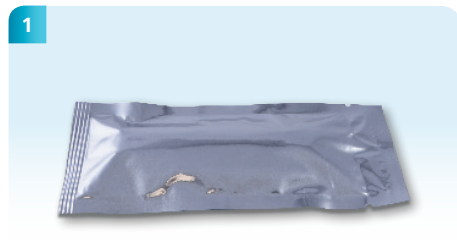

Příprava


Před zahájením testu nechte testovací kazetu ve fóliovém sáčku temperovat na pokojovou teplotu (15 °C až 27 °C). Z fóliového obalu vyjměte test na drogy.



- Zachyťte čerstvou moč do pohárku. Jestliže je moč zakalená, počkejte, až se zakalení usadí.
- Sejměte ochranný kryt a ponořte test drog nejméně na 10 sekund až ke značce do moči. Zajistěte, aby testovací kazeta byla ponořená jen k dolnímu okraji.
- Dbejte, abyste se nedotkli vyhodnocovacího okénka a abyste na ně nanesli moč.




- Na testovací kazetu opět nasadte kryt a položte ji na rovnou plochu. Testovací kazety se již nedotýkejte a nehýbejte s ní. Počkejte na zobrazení barevných čar v reakčním poli.

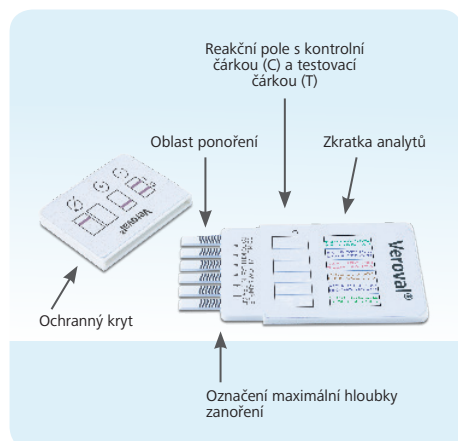

- 4 • Výsledek odečtete přibližně po 5 minutách, ne však později než po 10 minutách.
- Test drog musí být vyhodnocen za dobrých světelných podmínek, aby bylo možné rozpoznat i slabé barevné čárky.

K vyhodnocení výsledku přikročte poté, co se v reakčním poli pod (C) objeví čárka. Není důležité, jak silná nebo slabá je kontrolní čárka. Každý proužek testu je třeba vyhodnotit samostatně.

Negativní výsledek

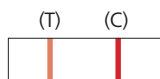

V případě negativního výsledku, tedy **vzorek moči bez drog**, se v reakčních polích objevují **světle až tmavě červené testovací čárky (T)** a **světle až tmavě červené kontrolní čárky (C)**.

Koncentrace těchto specifických drog (nebo jejich derivátů) ve vzorku leží pod mezní hodnotou.


Pozitivní výsledek



Při **pozitivním výsledku** se v reakčních polích nezobrazují **žádné testovací čárky (T)** a jen **světle až tmavě červené kontrolní čárky (C)**.

Koncentrace těchto specifických drog (nebo jejich derivátů) ve vzorku leží nad mezní hodnotou. Závěry ohledně výšky koncentrace a tím závažnosti konzumace nejsou možné.

Neplatný výsledek

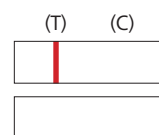

Jestliže v reakčních polích vidíte **jen čárky testu (T)**, **žádné kontrolní čárky (C)** nebo **dokonce vůbec žádné čárky**, je **test neplatný**.

Zkontrolujte, zda jste přesně a ve všech bodech dodrželi návod k použití. Proveďte nový test s novým vzorkem moči.

Pokyny a omezení:

- Víceúčelový rychlý test není lékařský výrobek, a proto se nesmí používat k diagnostickým účelům.
- Test je pozitivní, jen pokud skutečně není vidět **žádná testovací čárka (T)**.
- Úmyslně použité příměsi ovlivňující výsledek mohou test nepříznivě ovlivnit. V případě předpokládaného zkreslení je třeba test zopakovat s novým vzorkem moči.
- Domácí test nedokáže rozlišovat mezi užívanými drogami a příbuznými léky vydávanými jen na lékařský předpis.
- Třebaže lze vyloučit zkreslení testu širokým spektrem látek, nelze vyloučit, že výsledek mohou zkreslit jiné látky a technické chyby nebo chyby při postupu.