

ONLINE M+EDICAL

JEDNORÁZOVÉ ZDRAVOTNICKÉ
A OCHRANNÉ RUKAVICE
Produktová nabídka



Kde se používají rukavice **MERCATOR**?

Ve zdravotnickém sektoru a službách s ním spojených jsou jednorázové rukavice základním prostředkem umožňujícím bezpečnou práci.

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ:

Jednorázové, nesterilní vyšetřovací a ochranné rukavice pro použití ve zdravotnickém prostředí, určené pro ochranu pacienta a uživatele před křížovou kontaminací, k provádění lékařských a diagnostických vyšetření, léčebných úkonů a prací s kontaminovaným zdravotnickým materiálem.



ORDINACE



VETERINÁŘSTVÍ



PEČOVATELSKÉ DOMY



NEMOCNICE



ORDINACE
SPECIALISTŮ



FYZIOTERAPIE



ESTETICKÁ MEDICÍNA



ESTETICKÁ MEDICÍNA



LABORATOŘE



LÉKÁRNY



VELKOOBCHODY SE
ZDRAVOTNICKÝMI
POTŘEBAMI



Hlavní pravidla bezpečnosti a hygieny práce

Ruce jsou nejčastější cestou přenosu mikroorganismů. Správným způsobem, jak zabránit infekci, je dodržovat ve zdravotnických zařízeních příslušné hygienické standardy a postupy. Používání rukavic pro jednorázové použití správně zvolených podle typu prováděné práce je nejen plněním povinností zaměstnavatele vyplývajících přímo ze zákoníku práce, ale především přispívá k bezpečnosti personálu.

! Nezapomeňte!

Povinností zaměstnavatele vymezenou v oddílu IX. zákona ze dne 26. června 1974 – zákoníku práce (Sb. Polské republiky č. 24/1974, pol. 141) je zajistit zaměstnancům bezplatně účinné osobní ochranné prostředky přizpůsobené danému typu rizika.

Jednorázové rukavice




Jednorázové rukavice jsou všeobecně a ochotně používané ochranné prostředky. Mikroorganismy – bakterie, mykobakterie, plísně a viry představují hlavní nebezpečí ve zdravotnickém prostředí. Dodržování základních zásad hygieny rukou společně s používáním rukavic správně zvolených podle druhu nebezpečnosti chrání jak uživatele, tak pacienta.

Kvalitu rukavic a jejich vlastnosti upravují přísné a podrobné směrnice uvedené v příslušných nařízeních a normách.



Proč jsou rukavice důležité?

Ve zdravotnickém sektoru, kde existuje ohrožení biologickými a chemickými faktory, umožňují jednorázové rukavice bezpečnou práci. Jejich hlavním úkolem je ochránit personál i pacienta před infekcí a kontaktem s nebezpečnými přípravky.

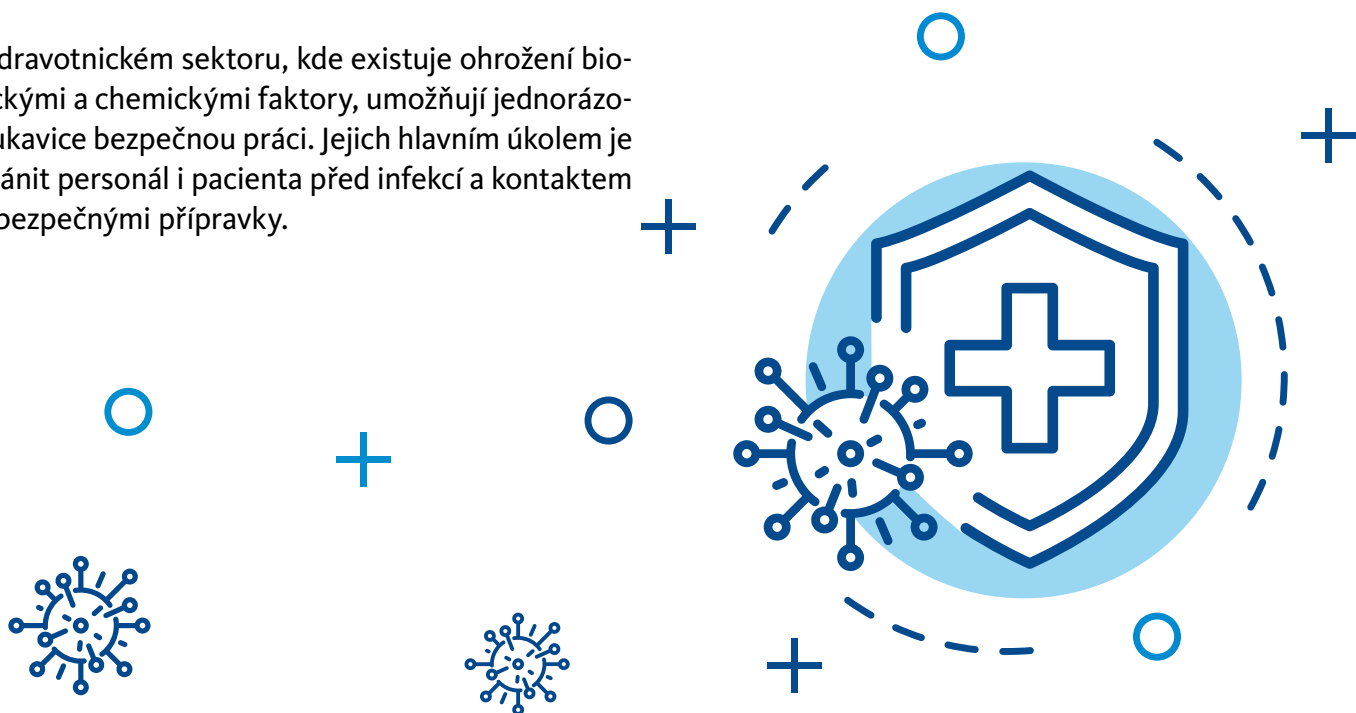

● Jak správně vybrat rukavice?

1. Určete oblast použití.
2. Určete riziko styku s biologickým materiálem.
3. Určete riziko expozice virům.
4. Určete riziko styku s chemickými látkami, mj. se saponáty a dezinfekčními přípravky.
5. Určete potenciální styk s potravinami.
6. Určete riziko přecitlivělosti nebo alergických reakcí I. typu – na latex nebo/a IV. typu – na chemické urychlovače.
7. Po stanovení požadavků zvolte vhodné rukavice podle tabulky přiřazené k nabídce výrobků. Je dobré pamatovat nejen na ochranu samotných rukou, ale také zápěstí – pro tento účel můžeme použít rukavice s prodlouženou manžetou.
8. Nezapomeňte zvolit vhodnou velikost, která zajistí komfort při používání rukavic a preciznost při provádění manuálních úkonů.

● Přednosti správného výběru rukavic

Správně vybrané rukavice přizpůsobené uživateli a pracovním podmínkám při zohlednění rizikových faktorů a také správně nastavené postupy jsou nejúčinnějším způsobem, jak zajistit na patřičné úrovni bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která je žádoucí jak kvůli nutnosti dodržování právních předpisů platných v sektoru, tak i očekávání veřejnosti a také možnosti dosažení příznivých výsledků v organizaci.

● NEZAPOMEŇTE!



Před a po nasazení rukavic proveďte pokaždé dezinfekci rukou. Pokud máte k tomu důvod, ruce si umyjte. Řiďte se směrnicemi WHO.



Rukavice jsou výrobek pro jednorázové použití. Rukavice nedezinfikujte – je to zakázáno.



Používejte minimálně jeden pár jednorázových rukavic pro jeden výkon. Po jejich sundání je zlikvidujte podle místních postupů!



Nepoužívejte rukavice ve styku s předměty pro osobní potřebu.



Zabraňte styku rukavic s obecně dostupnými povrchy (např. kliky, madla), aby se vyloučilo riziko křížových infekcí.

● Široké uplatnění vyšetřovacích a ochranných rukavic

Zdravotnické rukavice.

Posouzení shody podle nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Třída I – Vyšetřovací rukavice.

Třída I sterilní – Sterilní vyšetřovací rukavice.

Třída IIa – Chirurgické rukavice.

Ochranné rukavice.

Posouzení shody podle nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Kategorie I – pro ochranu před nebezpečím s minimálním rizikem.

Kategorie II

Kategorie III, typ C

Kategorie III, typ B

Kategorie III, typ A





V závislosti na plánovaném použití mohou být rukavice klasifikovány buď dvojím způsobem, tj. být zdravotnickým prostředkem a současně osobním ochranným prostředkem, anebo jednotlivě, tedy jako pouze zdravotnický prostředek, anebo jako pouze osobní ochranný prostředek.

Význam piktogramů na obalech vyšetřovacích a ochranných rukavic


















Normativní piktogramy

	zdravotnický prostředek
	výrobek pro jednorázové použití
	nesterilní výrobek
	kvalita rukavic není zaručena v případě poškození obalu
	chraňte před slunečním světlem
	chraňte před vlhkem
	uchovejte při stanovené teplotě
	rukavice vyrobené z přírodního latexu, mohou vyvolat alergickou reakci
	kód výrobní šarže
	katalogové číslo
	autorizovaný zástupce v Evropském společenství
	dovozce
	distributor
	datum expirace
	datum výroby
	výrobce (symbol musí doplňovat název a adresa výrobce)
	značka CE
	seznamte se s návodem
	výrobek vhodný pro styk s potravinami
	recyklovatelné – vlněná lepenka
	k recyklaci – papír
	s obalem lze nakládat jako s komunálním odpadem






Dodatečné piktogramy

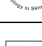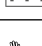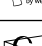	rukavice vyrobené z nitrilu
	rukavice vyrobené z polyvinylchloridu

Dodatečné piktogramy

	označení pudrovaných rukavic
	označení rukavic bez pudru
	označení rukavic potažených uvnitř polymerovou vrstvou
	rukavice s hladkým povrchem
	rukavice s mikrotexturovaným povrchem s dodatečnou texturou na konečcích prstů
	rukavice s hladkým povrchem s texturou na konečcích prstů
	rukavice s texturovaným povrchem
	ochrana proti účinkům fentanylu podle standardu ASTM D 6978
	ochrana proti virům a krevním patogenům podle standardu ASTM F 1671 a ISO 16604
	ochrana před cytostatiky podle standardu ASTM D 6978
	AQL: (z angl. <i>acceptance quality limit</i>) – úroveň těsnosti rukavic podle standardu EN 455-1 a EN ISO 374-2
	speciální systém balení omezující kontaminaci
	rukavice vyrobené patentovanou technologií „LOW DERMA“ s pozitivním výsledkem klinických testů, doporučené pro alergiky a osoby s citlivou kůží rukou
	osobní ochranný prostředek
	počet kusů v obalu dle hmotnosti
	doplňková informace na vnitřní straně obalu
	chraňte před účinky ozonu

Normativní piktogramy o zkouškách stupně odolnosti proti chemikáliím, bakteriím, plísním a virům

ISO 374-1/TYP A	ISO 374-1/TYP B	ISO 374-1/TYP C	ISO 374-5:2016	ISO 374-5:2016
				
UVWXYZ	XYZ			VIRUS
TYP A: Nejvyšší ochrana proti chemikáliím	TYP B: Vysoká ochrana proti chemikáliím	TYP C: Základní ochrana proti chemikáliím	Ochrana proti bakteriím a plísním	Ochrana proti bakteriím, plísním a virům

Označování velikosti barvou

Systém OVB vznikl, aby usnadnil uživatelům identifikaci správné velikosti bez ohledu na značku výrobku. Barevný proužek zvýrazněný na jednotlivém balení znamená konkrétní velikost rukavic.



Nezapomeňte zvolit vhodnou velikost, která zajistí komfort při používání rukavic.

LATEXOVÉ RUKAVICE





Hevea brasiliensis – strom, z něhož se získává kaučukové mléko a po vhodném zpracování mléčná šťáva, která slouží k výrobě latexu.



aktuálně probíhá 90 % světové výroby latexu v Asii.

Tato surovina se široce využívá v průmyslu, mj. k výrobě jednorázových rukavic.

Latexové rukavice se vyznačují:

- pružností a měkkostí,
- odolností a pohodlným používáním,
- vynikající citlivostí v dotyku, která poskytuje uživateli pocit „druhé pokožky dlaně“.



Latex, z něhož se rukavice vyrábí, je přírodní surovina

Proteiny obsažené v latexu mohou vyvolat alergii I. typu, proto se materiál nedoporučuje pro osoby náchylné k alergiím.

ROZDĚLENÍ RUKAVIC



ECONOMY



STANDARD



PREMIUM

MERCATOR dermagel® coated

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
vnitřní polymerizace =
snadné navlékání



Latexové rukavice bez pudru s
vnitřní polymerovou vrstvou.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	krémová
vnitřní povrch:	bez pudru – s polymerovou vrstvou
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	X
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD100060 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Ordinace



Veterinářství



Ošetřovatelská
péče



Styk s potravinami



Stomatologie

MERCATOR comfort® powder-free

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
vnitřní chlorovaná vrstva = snížený obsah
alergizujících proteinů a chemických pozůstatků



Latexové rukavice bez pudru s
vnitřní chlorovanou vrstvou.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	světle žlutá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,0 nebo 1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	X
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD100050 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Ošetřovatelská
péče



Veterinářství



Stomatologie



Styk s potravinami



Ordinace
specialistů

MERCATOR ambulance® high risk

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
silnější než standardní rukavice + dlouhá manžeta = vysoký stupeň bezpečnosti



Dlouhé, silné a masivní latexové rukavice bez pudru PREMIUM. Pro vysoce rizikové výkony podle kat. III OOP.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	tmavě modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	50 ks / 10 × 50 ks
velikosti:	S M L XL
referenční číslo:	RD100110 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Uniformované služby



Ošetrovatelská péče




Centrální sterilizace



Práce s cytostatiky



Záchranná služba

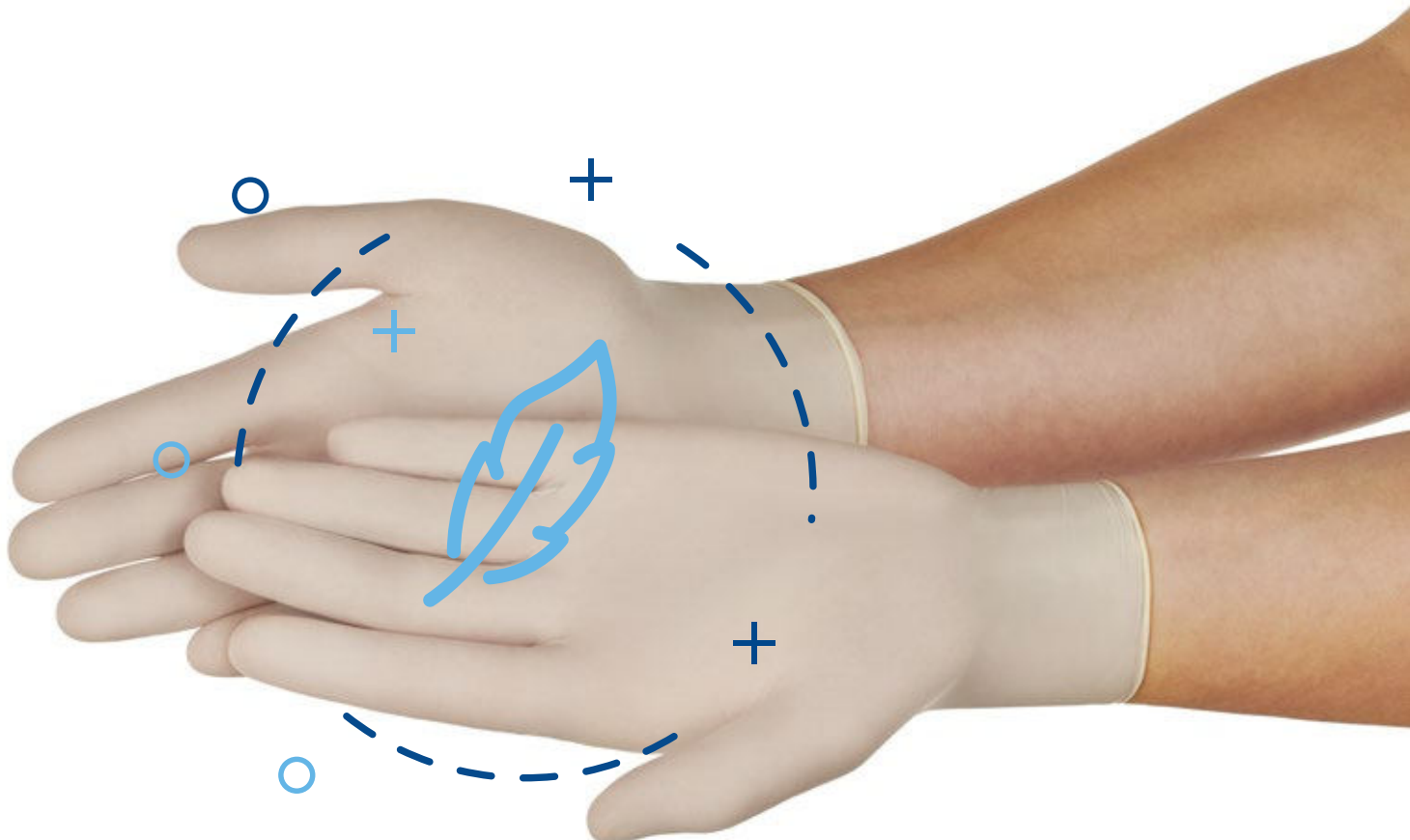

MERCATOR santex[®] powdered

● **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**

k dispozici ve 3 variantách:

- ▶ hladký povrch = komfort při práci
- ▶ texturovaný povrch = lepší úchop
- ▶ texturované konečky prstů = přesnost pohybu



Latexové pudrované rukavice.
Snižují pocení dlaní.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	krémová
vnitřní povrch:	kukuřičný škrob (USP)
vnější povrch:	texturované konečky prstů / hladký / texturovaný
AQL:	1,0 nebo 1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ C
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✗
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD110100 01-05 – hladké RD110860 01-05 – texturované RD112570 01-05 – texturované na konečcích prstů

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách



HLADKÝ POVRCH



TEXTUROVANÝ POVRCH



TEXTUROVANÉ KONEČKY PRSTŮ

● **Doporučeno pro oblasti použití:**



Ošetrovatelská péče



Veterinářství



Hygiena a sanitace práce



Ordinace specialistů



Styk s potravinami

MERCATOR simple latex

OCHRANNÉ RUKAVICE JSOU RUKAVICE KLASIFIKOVANÉ JAKO OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ NEJSOU ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY.

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
ideálně se osvědčí při činnostech vyžadujících vysokou dotykovou citlivost



Latexové pudrované ochranné rukavice.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	krémová
vnitřní povrch:	pudrovaný
vnější povrch:	hladký
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RP110020 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s potravinami




Hygiena a sanitace práce

⚠ Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.



NITRILOVÉ RUKAVICE

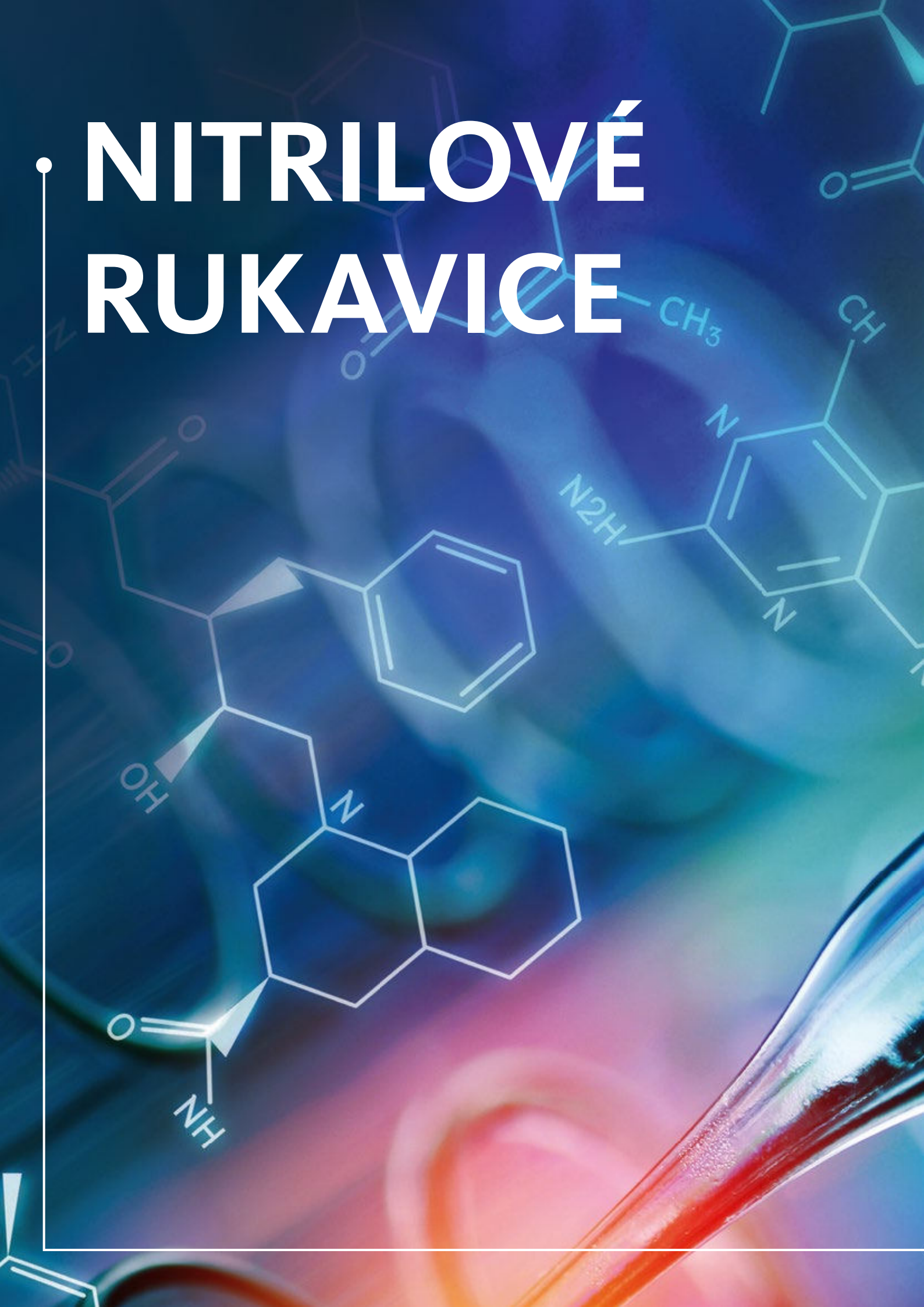



Nitril – butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR) – je materiál vyrobený z organických chemických sloučenin. Ve výrobním procesu této suroviny došlo k úpravám, díky nimž může konkurovat přírodnímu kaučuku.



Nitrilové rukavice představují ideální alternativu k rukavicím vyrobeným z přírodního suroviny.

Nitrilové rukavice:

- neobsahují latexové proteiny – jsou bezpečné pro osoby citlivé na latex
- mají na minimum snížený obsah chemických urychlovačů vulkanizace
- díky svým vlastnostem tvoří dobrou bariéru pro chemické látky



Minimalizovaný obsah chemických urychlovačů podstatně snižuje riziko vzniku alergie IV. typu.

ROZDĚLENÍ RUKAVIC



ECONOMY



STANDARD



PREMIUM



NADČASOVÁ KLASIKA

OVĚŘENÁ KVALITA
NA DOSAH RUKY

Vysoce kvalitní nitrilové rukavice bez pudru – klasická nabídka, která se osvědčí téměř v jakýchkoliv podmínkách. Odolné proti průniku mikroorganismů: virů, plísni a bakterií.



Mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů.

Testované proti průniku vybraných cytostatik.

Bariéra proti virům, bakteriím a plísním potvrzená přísnými testy.

Testované pro styk s potravinami.

















MERCATOR nitrylex® classic

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
k dispozici ve 3 barevných variantách:
modré, fialové a bílé



Klasické nitrilové rukavice bez pudru.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	modrá  fialová  bílá 
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks 200 ks / 10 × 200 ks
velikosti:	    
referenční číslo:	 100 ks: RD300190 01-05  200 ks: RD300960 01-05  100 ks: RD301690 01-05  200 ks: RD301680 01-05  100 ks: RD301430 01-05  200 ks: RD300970 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

DOSTUPNÉ VERZE BAREVNÉHO PROVEDENÍ



MODRÁ



FIALOVÁ



BÍLÁ

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s vybranými chemikáliemi



Laboratoře



Ošetrovatelská péče



Obvazování ran a výměna obvazu



Příprava pacienta k výkonu

DELŠÍ A PEVNÉ NITRILOVÉ
RUKAVICE PRO TY, KTEŘÍ
KLADOU DŮRAZ NA VYSOKÝ
STUPEŇ OCHRANY

MERCATOR nitrylex® classic long

Nitrilové rukavice s dlouhou manžetou vyznačující se vysokou kvalitou. Texturovaný povrch umožňuje pevný úchop, a to i v mokřém prostředí. Rukavice silnější než standardní. Vyrábí se s využitím nejmodernějších technologií, a díky tomu vykazují vysokou pružnost a dobrou dotykovou citlivost bez snížení manuální preciznosti. **MERCATOR nitrylex® classic long** je výrobek určený náročným uživatelům!



MERCATOR nitrylex® classic

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
texturovaný povrch = lepší úchop



Víc než klasické nitrilové rukavice s texturovaným povrchem.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks 200 ks / 10 × 200 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	100 ks: RD303090 01-05 200 ks: RD303100 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s vybranými chemikáliemi



Laboratoře



Práce v mokřém prostředí



Ošetrovatelská péče



Infekční oddělení

MERCATOR nitrylex® classic long

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
Dlouhá manžeta = vyšší stupeň bezpečnosti.



Klasické nitrilové rukavice ve verzi s dlouhou manžetou, bez chemických urychlovačů.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	S M L XL
referenční číslo:	RD302550 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Centrální sterilizace



Práce v mokřém prostředí



Kontakt s cytostatiky



Péče o ležícího pacienta



Hospice a domy sociálních služeb



MERCATOR nitrylex® beFree

MERCATOR nitrylex® beFree jsou rukavice:

- bez pudru, bez latexu,
- bez chemických urychlovačů,
- bez síry.



Patented Technology *

KLINICKY POTVRZENO

snižuje alergii
I. a IV. typu zajištěním
účinné ochrany

STOP ALERGIÍM

patentované řešení pro ty
nejcitlivější uživatele díky
technologii LOW DERMA™

LÍDR V TECHNOLOGIÍCH

první americké osvědčení FDA
vydané pro technologii LOW DERMA™
u zdravotnických rukavic



ASTM F 1671,
ISO 16604

rukavice odolné proti průniku
virů a krevních patogenů



ASTM D 6978

rukavice odolné proti
průniku cytostatik



EN 455-1,
EN ISO 374-2

rukavice odolné proti
průniku bakterií a plísní na
úrovni AQL 1.0

MERCATOR nitrylex® beFree

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:** určeno pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou rukou



Nitrilové rukavice bez chemických urychlovačů, které prošly klinickými testy **Modified Draize-95 test**



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ C
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD300830 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Stomatologie



Neonatologická a pediatriká oddělení



Ochrana rukou u osob s alergickými problémy



Geriatrická oddělení



Onkologická oddělení

MERCATOR nitrylex® beFree long

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:** určeno pro osoby s citlivou pokožkou rukou, které potřebují zvýšenou ochranu v podobě prodloužené manžety



Dlouhé nitrilové rukavice bez chemických urychlovačů, které prošly klinickými testy **Modified Draize test-95.**



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ C
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	S M L XL
referenční číslo:	RD302290 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Péče o ležícího pacienta



Gynekologická vyšetření



Ochrana rukou u osob s alergickými problémy



Kontakt s cytostatiky



Endoskopická pracoviště

MERCATOR nitrylex® complete

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
precizní způsob složení rukavic a konstrukce obalu umožňující vyjmout rukavice za manžetu po jedné



Nitrilové rukavice bez pudru. Delší než standardní. Výjimečný cit, dotyková citlivost a pracovní preciznost.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	fialová
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů
AQL:	0,65
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD301020 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Odběr a příprava biologického materiálu k analytickému vyšetření



Ošetrovatelská péče



Výkony spojené s přístupem k cévám



Styk s vybranými chemikáliemi



Stomatologie

MERCATOR nitrylex® high risk

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
silnější a delší než standardní rukavice = vysoký stupeň bezpečnosti rukou i zápěstí.



Nitrilové rukavice bez pudru pro vysoce rizikové výkony podle kat. III OOP.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	oranžová
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	S M L XL
referenční číslo:	RD300010 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Dekontaminace ploch znečištěných potenciálně infekčním materiálem



Ošetrovatelská péče



Centrální sterilizace



Vyšetření per rectum



Převážka zdravotnického odpadu

MERCATOR nitrylex® green

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
uklidňující zelená barva



Nitrilové rukavice bez pudru.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	zelená (mátová)
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,0 nebo 1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD3013080 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Ošetrovatelská
péče



Neonatologická
a pediatrická
oddělení



Stomatologie



Infekční oddělení



Laboratoře

MERCATOR nitrylex® pink

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
růžová barva



Nitrilové rukavice bez pudru.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	růžová
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů
AQL:	1,0 nebo 1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✗
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD301440 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Podávání injekcí



Ošetrovatelská
péče, diagnostika



Neonatologická
a pediatrická
oddělení



Estetická medicína



Stomatologia



MERCATOR nitrylex® black

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
černá krycí barva



Nitrilové rukavice bez pudru.



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	černá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů
AQL:	1,0 nebo 1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	✗
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD301040 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Veterinářství



Hygiena a sanitace práce



Stomatologie



Styk s potravinami



Estetická medicína

MERCATOR nitrilex® magenta

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
výrazná barva magenta



- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Ošetrovatelská
péče, diagnostika



Neonatologická
a pediatrická
oddělení



Estetická
medicína



Stomatologie
Veterinářství



Stomatologie
Veterinářství

NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU

MERCATOR® simple nitrile

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
měkké a pružné, doporučovány
pro osoby citlivé na latex



- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s potravinami



Hygiena a sanitace
práce

⚠ Limitovaný počet kusů výrobku.

Nitrilové rukavice bez pudru.



typ rukavic:	vyšetřovací, nesterilní
barva:	magenta
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturovaný
AQL:	1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	X
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
odolnost proti cytostatikům*:	X
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD303000 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Nitrilové ochranné rukavice.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	mikrotextura s dodatečnou texturou na konečcích prstů
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RP300030 01-05_0002


* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

VINYLOVÉ RUKAVICE





Vinyl je jedním z PVC plastů. Polyvinylchlorid (PVC) má díky svým vlastnostem široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích.

 Vinylové rukavice jsou šetrné ke kůži uživatelů se sklonem k alergiím I. a IV. typu.



ROZDĚLENÍ RUKAVIC



ECONOMY



STANDARD



PREMIUM

VINYLOVÁ ZDRAVOTNICKÁ BARIÉRA



Vinylové

Bez pudru

Testované
pro styk
s potravinami

Transparentní
barva

Hladký povrch

Bariéra proti virům,
bakteriím a plísním
potvrzená přísnými testy



MERCATOR vinylex® powder-free

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
bez pudrového přípravku
= snížené riziko alergických reakcí



Vinylové rukavice bez pudru



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	transparentní <input type="checkbox"/>
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	hladký
AQL:	1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ C
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	X
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD200180 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Veterinářství



Styk s potravinami



Hygiena a
sanitární práce



Drobné montážní
práce



Převoz pacienta

MERCATOR hybrid+

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
syntetické rukavice ve vinyl-nitrilové formuli



Vinylové rukavice bez pudru



typ rukavic:	vyšetřovací, ochranné, nesterilní
barva:	modrá (krycí) <input checked="" type="checkbox"/>
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	hladký
AQL:	1,5
MD – zdravotnický prostředek:	třída I
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
odolnost proti cytostatikům*:	X
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RD202590 01-05

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Veterinářství



Hygiena a sanitace
práce



Estetická
medicína



Podávání léků



Ošetrovatelská
péče, diagnostika

! Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.

MERCATOR simple vinyl (pp)

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
snadnější navlékání díky přidání pudrového přípravku



Vinylové, pudrované, transparentní ochranné rukavice.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	transparentní <input type="checkbox"/>
vnitřní povrch:	pudrované
vnější povrch:	hladký
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	<input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL
referenční číslo:	RP210150 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s potravinami



Hygiena a sanitární práce

⚠ Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.

MERCATOR simple vinyl (pf)

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
bez pudrového přípravku
= snížené riziko alergických reakcí



Transparentní vinylové ochranné rukavice bez pudru, nezdravotnické.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	transparentní <input type="checkbox"/>
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	hladký
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	<input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL
referenční číslo:	RP200160 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s potravinami



Hygiena a sanitární práce

⚠ Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.

MERCATOR simple vinyl (pf blue)

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
modrá barva – vhodná pro styk s potravinami



Vinylové ochranné rukavice
modré barvy.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	hladký
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	P200170 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s
potravinami



Hygiena a
sanitární práce

MERCATOR simple vinyl (pf black)

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
rukavice v matné černé barvě



Vinylové rukavice v černé krycí barvě.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	černá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	hladký
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	XS S M L XL
referenční číslo:	RP200180 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s potravinami



Hygiena a
sanitární práce

- **!** VVýrobek je dostupný na objednávku.

• OCHRANNÉ RUKAVICE PODLE POUŽITÍ V KONKRÉTNÍM ODVĚTVÍ





Rukavice jako osobní ochranný prostředek (ochranné rukavice) slouží k ochraně rukou proti nežádoucím nebo zdraví škodlivým vnějším faktorům.

Průmyslové a ochranné rukavice:

- Chrání před škodlivými účinky čisticích přípravků a slabších saponátů.
- Zajišťují bezpečnost při práci spojené se zneškodněním odpadu.
- Chrání proti oděrům a malému poranění při prováděných pracích.
- Zajišťují hygienickou ochranu proti kontaminaci rukou.
- Zvyšují bezpečnost práce při styku s kluzkými a mokkými předměty.

Ochranné rukavice určené pro technické a provozní práce se vyznačují výrazně vyšší odolností proti mechanickému poškození. Jsou minimálně dvakrát silnější než klasické rukavice.

Delší manžeta (min. 29,5 cm) chrání nejen ruce, ale také předloktí. Výrazná textura ve tvaru diamantu na vnějším povrchu rukavic zvyšuje třecí sílu a zajišťuje stabilní úchop, zejména v mastném a mokřím prostředí.

Ochranné rukavice jsou určeny mj. pro elektrikáře, instalatéry, údržbáře, zámečníky a truhláře, pracovníky ve stavebnictví, technické a provozní pracovníky, pracovníky v hygieně, v technických službách apod.

DOPORUČENÉ PRO ODVĚTVÍ:



Autovýroba



Zemědělství, zahradnictví



Konstrukce



Sběr ovoce a zeleniny



Automotive



Chemický průmysl



Průmysl



Kutilové



Mechanika



Lakýrnictví



Těžký průmysl



Tuning

ROZDĚLENÍ RUKAVIC



ECONOMY



STANDARD



PREMIUM

Pevný úchop, přesnost, odolnost proti vybraným chemikáliím.



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v náročném prostředí

Ovládání mobilních zařízení

Pružné a vysoce odolné proti roztažení

Revoluční 3D textura ve tvaru diamantu:

- zajišťuje stabilní a pevný úchop, a to i v náročném pracovním prostředí
- zabraňuje pocení rukou při používání

2x silnější než standardní rukavice

Odolné proti vybraným chemikáliím, a také virům, bakteriím a plísním

Schválené pro styk s potravinami


DIAMOND TEXTURE FOR EXTRA GRIP

DIAMOND TEXTURE EXTRA STRONG



MERCATOR gogrip black

- ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:** snadné navlékání rukavic a pevný úchop díky speciální textuře ve tvaru diamantu, a to i v mastném a mokřem prostředí, umožňuje ovládat zařízení s dotykovými displeji

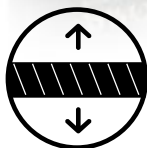

2x silnější než standardní rukavice – tloušťka 0,18 mm (finger)

- Vhodné pro použití v odvětvích:**



Autovýroba



Konstrukce



Montáže



Průmysl




Mechanika



Kutilové

MERCATOR gogrip blue

- ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:** modrá barva – jednoduše rozlišitelné rukavice určené pro styk s potravinami, snadné navlékání a pevný úchop, umožňují ovládat zařízení s dotykovými displeji

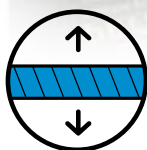

2x silnější než standardní rukavice – tloušťka 0,18 mm (finger)

- Wskazane do stosowania w branżach:**



Masný a rybny průmysl



Mlékárenský průmysl



Výroba nápojů



Zpracování ovoce a zeleniny



Výroba mražených potravin



Pekařská a cukrářská výroba

Černé nitrilové rukavice s revoluční texturou ve tvaru diamantu



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	černá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	diamantová 3D textura
AQL:	1,5
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	50 ks / 10 × 50 ks
velikosti:	M L XL XXL
referenční číslo:	RP300230 03-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Modré nitrilové rukavice s revoluční texturou ve tvaru diamantu.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	diamantová 3D textura
AQL:	1,5
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	50 ks / 10 × 50 ks
velikosti:	S M L XL XXL
referenční číslo:	RP300300 02-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Pevnost a odolnost určená specialistům



3x silnější než standardní rukavice

Odolné vůči vybraným chemikáliím (typ B)

Vysoká kvalita a odolnost

Dobře viditelná, výrazná barva vyjímající se v každém prostředí

Ovládání mobilních zařízení

Revoluční 3D textura ve tvaru diamantu:

- zajišťuje stabilní a pevný úchop, a to i v náročném pracovním prostředí
- zabraňuje pocení rukou při používání


DIAMOND TEXTURE FOR EXTRA GRIP

DIAMOND TEXTURE EXTRA STRONG



MERCATOR gogrip orange

- ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
3x silnější než standardní rukavice –
dodatečná ochrana s možností zároveň ovládat zařízení s
dotykovými displeji

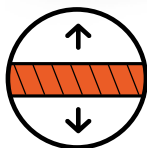

3x silnější než standardní
rukavice rukavice –
tloušťka 0,26 mm (finger)

- Vhodné pro použití v odvětvích:**



Tuning



Automotive



Těžký průmysl



Lakýrnictví



Chemický průmysl

Oranžové nitrilové rukavice s
revoluční texturou ve tvaru diamantu.




typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	oranžová
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	diamantová 3D textura
AQL:	1,5
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	50 ks / 10 × 50 ks
velikosti:	M L XL XXL
referenční číslo:	RP300250 03-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

MERCATOR gogrip green

- ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
3x silnější než standardní rukavice – dodatečná
ochrana při současném ovládní zařízení s
dotykovými displeji

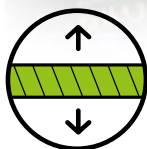

3x silnější než standardní
rukavice rukavice –
tloušťka 0,26 mm (finger)

- Vhodné pro použití v odvětvích:**



Zemědělství,
zahradnictví



Sběr ovoce a
zeleniny



Automotive



Chemický průmysl



Kutilové

Jedinečné zelené nitrilové rukavice
s revoluční strukturou ve tvaru
diamantu



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	zelená
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	diamantová 3D textura
AQL:	1,5
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ B
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	50 ks / 10 × 50 ks
velikosti:	M L XL XXL
referenční číslo:	RP300290 03-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

MERCATOR high protect

- ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:** silné, chemicky odolné nitrilové rukavice vytvořené pro profesionály, s nejvyšším stupněm ochrany – kat. III, typ A. Vyhovují normě EN 388.



- Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s potravinami



Průmysl



Zpracování ovoce a zeleniny



Úklidové práce



Chemická výroba



Vhodné pro instalatery, elektrikáře

Nitrilové rukavice s nejvyšším stupněm odolnosti proti chemikáliím.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	modrá
vnitřní povrch:	bavlněná podšívka
vnější povrch:	textura v úchopové části
AQL:	1,0
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie III, typ A
odolnost proti bakteriím a plísním:	✓
odolnost proti virům:	✓
odolnost proti chemikáliím*:	✓
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	1 pár, 24 páry/display, 96 párů/krabice
velikosti:	S M L XL XXL
referenční číslo:	RP300222 02-06

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

ideall® yellow

- ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:** anatomický tvar – rozlišení pravé a levé rukavice



- Doporučeno pro oblasti použití:**



Styk s potravinami



Hygiena a sanitace práce



Úklidové práce

Průmyslové rukavice jsou vyrobené ze žlutého přírodního kaučuku – latexu.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	žlutá
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	flokování
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami*:	✓
jednotkové / hromadné balení:	1 pár / 240 párů
velikosti:	S M L XL
referenční číslo:	RG100040 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

NITRILOVÉ RUKAVICE VYTVOŘENÉ PRO SPECIÁLNÍ ÚKOLY

33 cm



ideall® NITRILE MOTO

- **ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST:**
rukavice delší a přitom silnější než standardní



ideall® nitrile moto jsou nejpevnější
rukavice v naší nabídce.



typ rukavic:	ochranné, nesterilní
barva:	černá ■
vnitřní povrch:	bez pudru
vnější povrch:	texturované na celém povrchu s dodatečnou texturou na konečných prstech
MD – zdravotnický prostředek:	X
PPE – osobní ochranný prostředek:	kategorie I
odolnost proti bakteriím a plísním:	X
odolnost proti virům:	X
odolnost proti chemikáliím*:	X
schválené pro styk s potravinami:	✓
jednotkové / hromadné balení:	100 ks / 10 × 100 ks
velikosti:	M L XL XXL
referenční číslo:	RD301870 03-06

* Zapoznej się ze szczegółowym raportem badań

- **Doporučeno pro oblasti použití:**



Automobilový
průmysl



Drobné montážní
práce



Průmysl



Hygiena a
sanitární
práce



Styk s potravinami

A close-up photograph of a person's hand wearing a bright orange nitrile glove. The hand is holding a small, dark, cylindrical object. The person is wearing a blue t-shirt. The background is a plain, light grey color. The text is overlaid on the left side of the image.

**• ERGONOMICKÉ
VÝROBKY –
DRŽÁKY NA OBALY
S RUKAVICEMI**




Navrženo podle potřeb uživatelů

Abychom vyšli vstříc potřebám uživatelů rukavic, kteří ocení ergonomicky uspořádaný pracovní prostor, připravili jsme nabídku držáků a košíků na vyšetřovací rukavice.

Držáky se montují na stěnu a díky tomu můžeme ušetřit místo na pracovní desce. Držák, který na desce stojí, umožňuje snadnější vytahování rukavic z obalu.

Typické vlastnosti našich držáků:

- praktické
- snadné na montáž
- univerzální – vhodné pro většinu obalů rukavic dostupných na trhu
- hygienické – při vyjímání rukavic není nutné se dotýkat krabičky, a to významně omezuje kontaminaci.

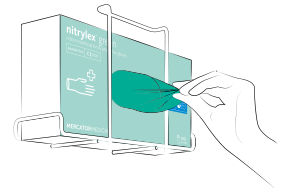

Nástěnné držáky **omezují kontaminaci obalů rukavic a přispívají k lepšímu uspořádání pracovní desky.**



Konstrukce držáků **umožňuje snadné mytí a dezinfekci jejich povrchu.**



Široký výběr držáků vhodný pro většinu obalů rukavic dostupných na trhu.



Držáky jsou určeny k montáži pomocí vrtů nebo **montážní pásky bez nutnosti vrtání.**



Držáky v bílé barvě vyrobené z ocelových drátů nebo plastové v různých variantách.



Držáky ve verzi s háčky usnadňují zavěšení obalů s rukavicemi na lůžko pacienta (při převozu) nebo na zákrokový vozík.

Jak se nasazují rukavice?



! Nezapomeňte!


K vyjmutí rukavic přistupujeme po provedení hygieny rukou.



1 Vytáhněte jednu rukavici z obalu tak, že ji potáhnete za manžetu.




2 Držte rukavici za manžetu a nasadte ji, aniž byste se dotkli její pracovní plochy, na opačnou ruku vůči té, kterou jste vytáhli rukavici z obalu.

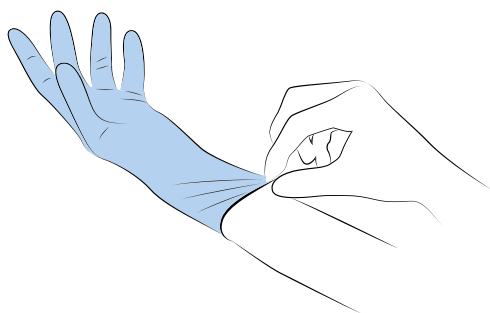


3 Natáhněte rukavici na ruku.



4 Vytáhněte druhou rukavici rukou, na které již máte nasazenou rukavici.

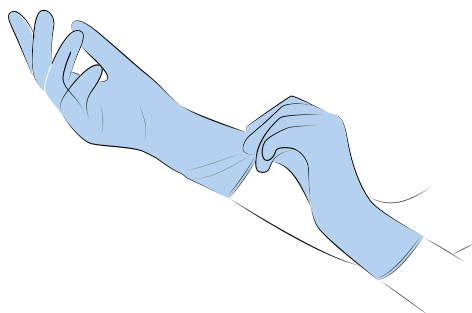


5 Nasadte rukavici na ruku a rovnoměrně ji rozložte.

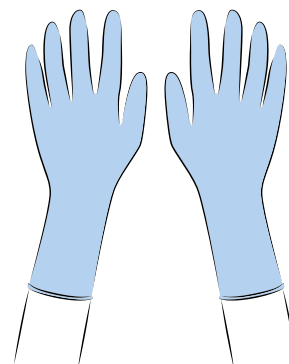


6 Hotovo!

! Nezapomeňte!


Po sundání rukavic opět přistoupíme k hygieně rukou.

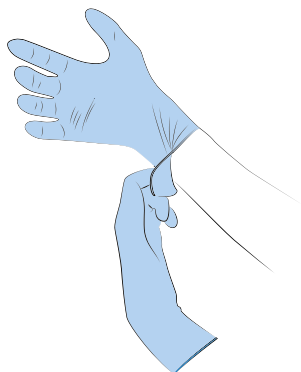

1 Uchopte rukavici prstem druhé ruky na úrovni manžety.

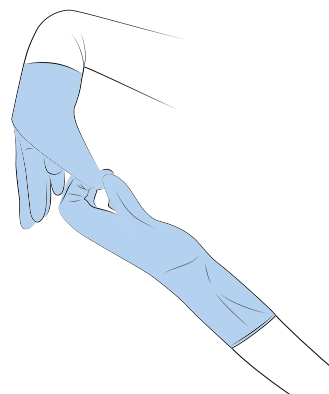


2 Rukavici shrňte do půlky ruky.

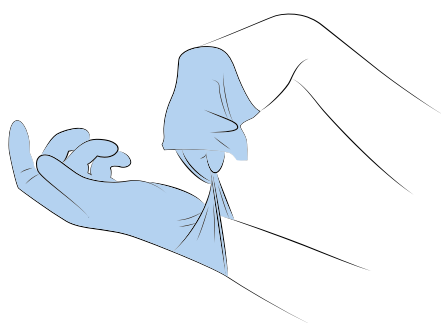


3 Druhou rukavici uchopte za její vnější okraj.



4 Při sundávání rukavic stahujte rukavice na rub.

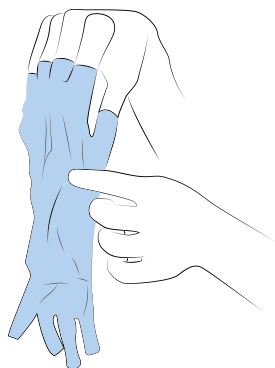

5 Uchopte obě rukavice, aniž byste se dotkli kontaminované plochy rukavic.

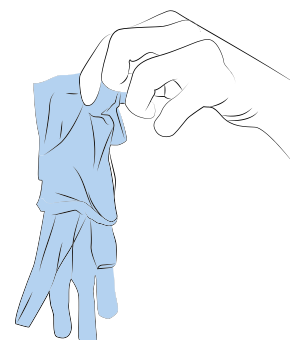

6 Se sundanými rukavicemi nakládejte jako se zdravotnickým odpadem!

DEJTE VIRŮM KOŠEM



NEVYHAZUJTE POUŽITÉ RUKAVICE
DO NÁDOB S BĚŽNÝM ODPADEM.
MOHOU SE STÁT ZDROJEM NÁKAZY
PRO DRUHÉ.



VYHAZUJTE JE POUZE A VÝHRADNĚ
DO NÁDOBY VHODNÉ PRO DANÝ
DRUH ZNEČIŠTĚNÍ.



A NEZAPOMEŇTE – POUŽITÉ RUKAVICE
JSOU VŽDY KONTAMINOVANÝ
ZDRAVOTNICKÝ ODPAD







Petr Beneš

CEO

benes@onlinemedical.cz



Iveta Kaplanová

Business development manager

kaplanova@onlinemedical.cz

+420 730 190 648